


LAS KIT

HIOSSSEN IMPLANT

La colocación de implantes dentales en el maxilar posterior puede ser un procedimiento quirúrgico particularmente desafiante debido a la reducción de la altura ósea atribuida a la presencia del seno. El kit de senos paranasales de enfoque lateral de Hiossen, conocido como LAS Kit, está diseñado para un levantamiento sinusal seguro para ayudar en el aumento del hueso sinusal.



Nuevo Diseño

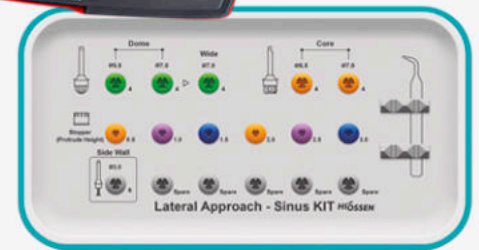


Diseño de fresa de cúpula

- Minimizar el contacto directo con la membrana mediante la formación de un párpado óseo.
- Control efectivo de la profundidad mediante el uso del sistema de tapón (incremento de 0,5 mm). Previene el daño a los tejidos blandos.


Minimiza el riesgo de perforación de la membrana

El diseño de fresa de vanguardia de forma redonda minimiza el riesgo de perforación de la membrana sinusal.


Preparación para ventana lateral

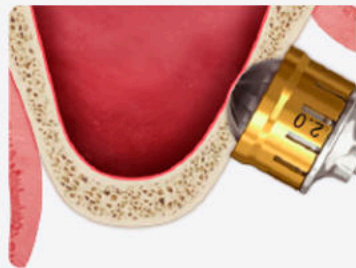

Extensión de Ventana

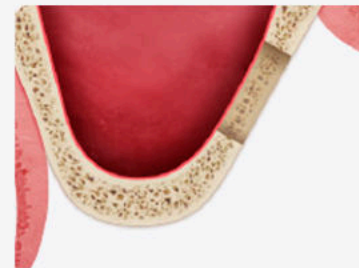

Injerto Óseo

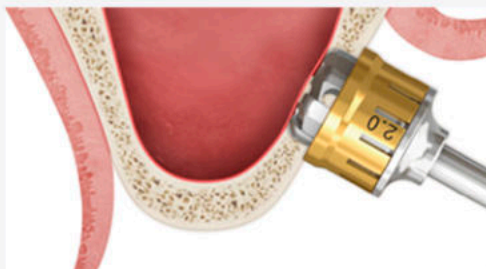

Diseño de la fresa central

- El filo de corte de forma redonda minimiza el contacto directo con la membrana.
- La punta de perforación cónica inversa y los diseños de borde redondo ayudan a prevenir la perforación de la membrana.

Proporciona simplicidad para controlar la profundidad ósea residual

- Profundidad de perforación controlada con un sistema de tapón eficaz (incremento de 0,5 mm) que evita daños en los tejidos blandos.
- Un total de 6 tapones: 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm.

