

# TODO INCLUIDO EN COMODIDAD

Fácil de configurar. Comience a escanear directamente al sacarlo de la caja


#### Todo en un paquete

- Pieza de mano del Medit i900.
- Cubierta de la pieza de mano.
- 2 Puntas de tamaño M.
- 2 Puntas de tamaño L.
- Herramienta de calibración.
- Modelo de práctica.
- Soporte para el escritorio.
- Soporte de montaje de pared.
- 2 cables flexibles.
- Memoria USB.





#### Integración Perfecta

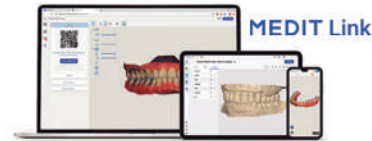Medit Link, nuestro sistema totalmente abierto, integra el Medit i900 con el software existente de su consulta, mejorando los flujos de trabajo sin complicaciones.



#### Especificaciones

Categoría	Medit i900	
Tecnología de escaneo	Velocidad de captura	Fastest
	Tecnología de imagen	Tecnología de vídeo 3D en movimiento / Captura de secuencias 3D a todo color
	Tecnología antivaho	Flujo de aire adaptable
	Captura de cámara	10 bit
Pieza de mano	Dimensiones (W x H x L)	36.7 x 35.3 x 223.4 mm
	Peso total	165 g (incluida la punta mediana)
Punta	Tamaño de la cabeza (ancho x alto)	L: 26.9 x 19.7 mm M: 22.4 x 16.3 mm S: 18.36 x 13.1 mm (se vende por separado)
	Campo de visión	L: 18 x 15mm (552 x 460 px) M: 14 x 11.5mm (428 x 352 px) S: 10 x 8 mm (308 x 252 px)
	Autoclavable	Hasta 150 veces Autoclave 134°C 4 mins y secado 20 mins (Tipo Pre-Vacío) Autoclave 135°C 10 mins min y secado 30 min (Tipo Gravedad)
	Material	PPSU Polyphenylsulfone
Cable	USB C-Type Power Delivery Cable: 2 m y 2.5 m	

 hiossenchile  
 @hiossenchile  
 contacto@hiossenchile.com

**HÍOSSEN**  
IMPLANT

**OSSTEM**<sup>®</sup>  
IMPLANT



# i900

## TODO para Ti

LA EVOLUCIÓN DEL  
ESCANEO INTRAORAL

# MEDIT

# TODO INCLUIDO EN INNOVACIÓN

El Medit i900 cuenta con tecnología de vanguardia para un escaneo más fluido, un manejo más fácil y una mayor precisión en el escaneo.

Una forma de trabajar más inteligente y sencilla.




# TODO INCLUIDO EN RENDIMIENTO

## Nueva Generación de Motor Óptico


El Medit i900 cuenta con un motor óptico innovador con tecnología de imagen de 10 bits, que ofrece una claridad de imagen inigualable, colores realistas y una profundidad de escaneo que captura cada detalle.

## Todo Incluido en Tecnología

El motor óptico de vanguardia del Medit i900 permite superar obstáculos de escaneo como metales reflectantes y espacios reducidos en la cavidad oral.

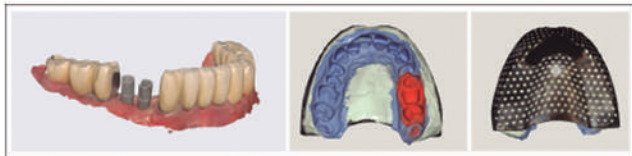

El Medit i900 cuenta con un área de escaneo más grande para una captura de datos rápida y completa, lo que lo convierte en la elección ideal para escanear tejidos o superficies no ideales.

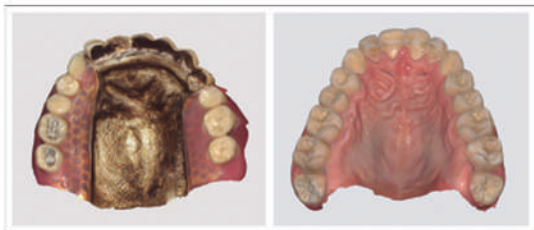

# TODO INCLUIDO EN USABILIDAD

Con un diseño ligero, ergonómico e inteligente, el Medit i900 asegura que cualquier persona en su clínica pueda dominar el escaneo con una facilidad inigualable.

Un campo de visión ampliado captura un área más grande con un esfuerzo mínimo, asegurando rapidez y precisión en cada sesión.

El nuevo diseño Unibody garantiza un equilibrio perfecto y elimina preocupaciones de contaminación.

## Comodidad para el Paciente

Múltiples tamaños de punta.



S: 18.36 x 13.1 mm.  
M: 22.4 x 16.3 mm.  
L: 26.9 x 19.7 mm.

## Funcionalidad revolucionaria de Touch Band y Touch Pad

Mejora tu experiencia con un escáner que redefine el proceso de escaneo con una intuitiva Touch Band y Touch Pad. Nuestra innovadora Touch Band de 360° proporciona una navegación fácil con retroalimentación háptica.

Una operación sin botones te brinda un control preciso desde cualquier ángulo y te permite iniciar y detener el escaneo fácilmente.



## Ergonómico con interacción inteligente

## Ligero. Compacto. Portátil.

Ligero como una pluma (165 gramos) y diseñado para facilitar el escaneo, nuestro escáner compacto y portátil ofrece una libertad sin límites.

## Vibrantes indicadores LED

Los indicadores LED de la parte inferior ofrecen una visibilidad vívida y rápida del estado del escáner, lo que simplifica aún más su experiencia general.

